

かんたん設置マニュアル

家族コール2・Aタイプ


型式

HK-2A

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- 足が床についたことをお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！

1. 標準構成

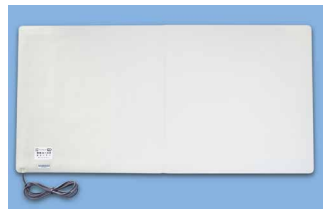

◀床センサー (MS1000K)



◀コンソール10 (HTH800-100K)



ACアダプタ





◀メロディチャイム10 (HRH800-100K)



ACアダプタ

2. 設置・接続と運用のポイント

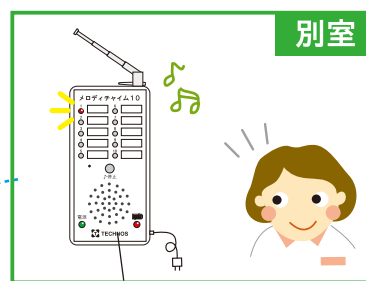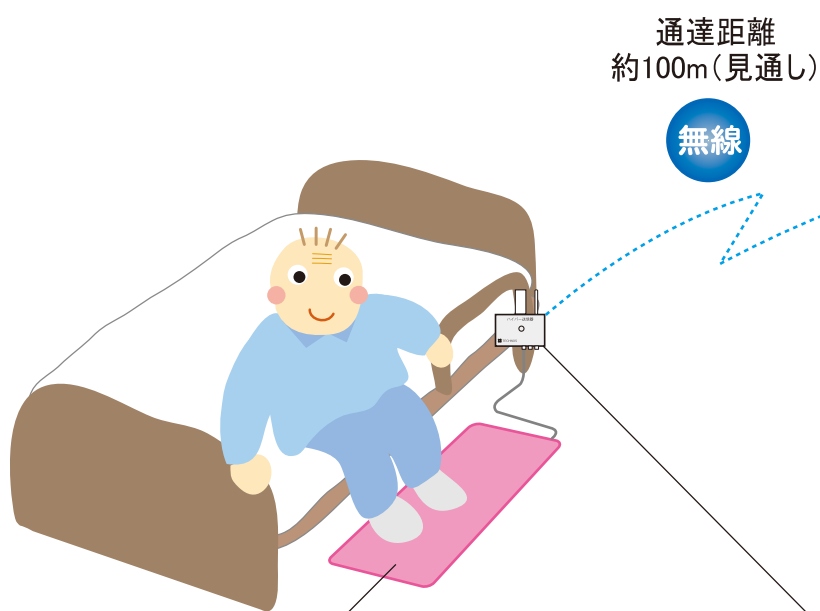


③メロディチャイム10の設置

ACアダプタをコンセントに差込み、電源を入れて下さい。

- ◆音 量 大・中・小より選択
- ◆報知時間 10秒・30秒・連続より選択

①床センサーの設置

床面にまっすぐ平らに広げて設置して下さい。

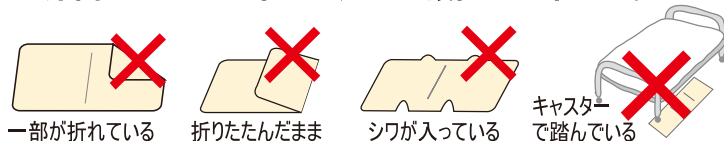

②コンソール10の設置と接続


フックで取り付け、電源を入れて下さい。

◆センサー接続ジャックに注意！



左もしくは中央に差し込んで下さい。
左・中央 = 荷重がかかった時に報知
右 = 荷重がなくなった時に報知

◆電源入忘れ防止！一時停止ボタン

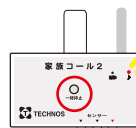

5分間作動停止後、自動復旧します。
* 作動停止中は♪ランプが点滅。
* すぐ解除したい時は電源を一旦OFFに。


◆電池切れに注意！



☐ ランプが点灯してお知らせします。
006P 9Vの電池で交換して下さい。

✓ コンソール10とメロディチャイム10は同グループで使用！

コンソール10とメロディチャイム10のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。
エリアスイッチはグループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

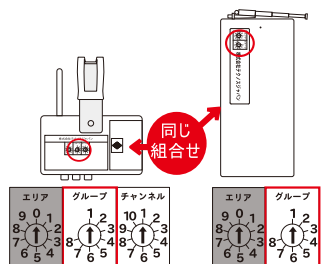
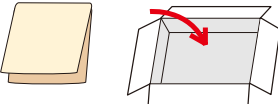
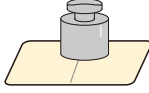

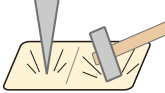




* 詳細は裏面へ

3. 動作確認方法

- ① 設置した床センサーを踏むなどして、センサーを反応させて下さい。
- ② メロディチャイム10が鳴ることを確認して下さい。

メンテナンスと注意事項

清掃方法	保管方法	
 <p>濡れた布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。 または、消毒用アルコールで清拭して下さい。</p>	 <p>所定の位置で折りたたんで箱に入れ、箱は立てずに寝かせて保管して下さい。（納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。） * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。</p>	
<p>❌ 禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。</p>		
<p>重い物 禁止</p>  <p>センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。</p>	<p>高温 禁止</p>  <p>耐温は40度です。高温になる温熱器具を近づけないで下さい。</p>	<p>衝撃 禁止</p>  <p>センサーを傷つけたり、衝撃を与えないで下さい。</p>
<p>水浸け 禁止</p>  <p>センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。</p>	<p>所定位置以外での折曲禁止</p>  <p>折り曲げ線以外で、折り曲げないでください。また、折り曲げ線で一部を折り曲げたまま使用しないで下さい。必ずしっかり伸ばして設置して下さい。</p>	

故障かな？と思ったら




センサーが鳴るのが遅い…

センサーはコンソール10の左もしくは中央のジャックに差しこんでいますか。右は荷重がかかりその荷重がなくなった時に報知をするジャックですので、対象者が踏んでその荷重がなくなった時になります。



センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…

コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」と「グループ」設定が一致していないと報知しません。また、他のメロディチャイム10に報知するなど、混信の原因になります。コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」「グループ」スイッチを同じ設定（組合せ）にして下さい。

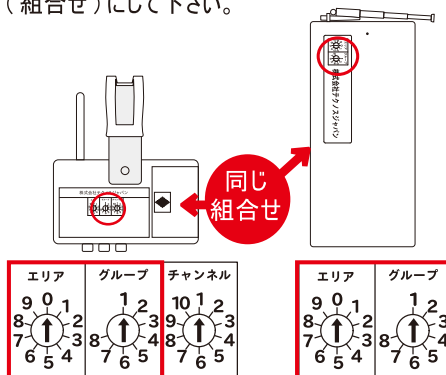

* エリアスイッチを使用しない場合は送受信器とも“0”に合わせて下さい。（出荷時は“0”に設定）

* メロディチャイム10のグループ設定を変更した際は、電源を一度OFFにし、2～3秒経ってから再度ONにして下さい。



メロディチャイム10のランプが点灯する…

コンソール10の電池が消耗すると、受信した際に対応するチャンネルランプとメロディチャイム10のランプが点灯します。

* コンソール10の電池消耗以外は、チャンネルランプが点滅します。

受信時以外のメロディチャイム10のランプ点灯はメロディチャイム10内部電池消耗のお知らせですので、すぐにACアダプタを差込み、充電を行って下さい。充電には約2時間かかります。

* 内部電池は、メロディチャイム10の移設時など短時間の電源保持が目的で実装しています。

通常は、必ずACアダプタを接続してご使用下さい。



コンソール10をACアダプタに差込んでもランプが消えない…

コンソール10の電池消耗ランプは電池残量を感知してお知らせをします。電池を変えないとランプは点灯し続けます。また、電池残量がなくなった電池を入れればなしにすると、液漏れを起こし、故障等の原因になりますので、速やかに交換するか、電池を抜いて下さい。



センサーが報知をしない…コンソール10のランプが点滅している…

これはコンソール10の一時停止機能（5分間）によるものです。一時停止を解除するには電源スイッチを切り、入れ直して下さい。



株式会社 テクノスジャパン

修理品は販売店様にご連絡の上、本社までお送り下さい。製品運用上のお困りごと等はお客様相談室で承っています。

■ 本社：〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266 TEL:079-288-1600 FAX:079-288-0969

■ お客様相談室：☎0120-230-580（受付時間：祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00,13:00～18:00）