

かんたん設置マニュアル

家族コール 2・Bタイプ

型式

HK-2B

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- ベッド上で起き上がるとお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！

1. 標準構成



◀ ベッドセンサー (BPS8025K)



◀ コンソール10 (HTH800-100K)



ACアダプタ

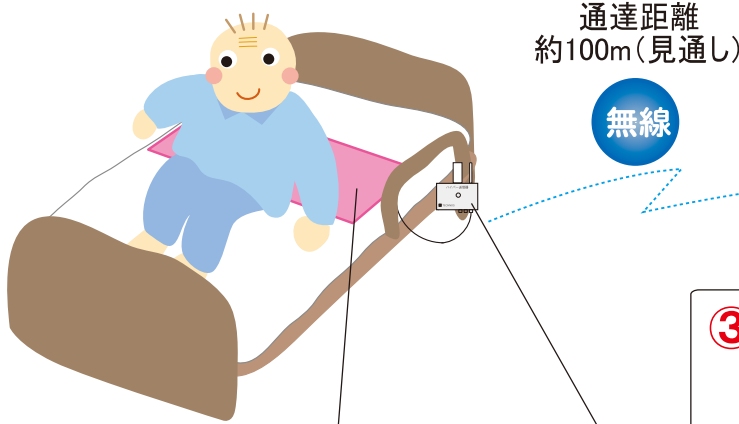


◀ メロディチャイム10 (HRH800-100K)



ACアダプタ

2. 設置・接続と運用のポイント



① ベッドセンサーの設置

マットレスの上、シーツの下に設置して下さい。



○ ベッドに対し横向き



○ 肩から背中に設置



× ギャッチアップの際に折れ曲がってしまう



× ベッドに対し縦向き



× お尻にかかっている



× 枕の下

③ メロディチャイム10の設置

ACアダプタをコンセントに差込み、電源を入れて下さい。

- ◆ 音量 大・中・小より選択
- ◆ 報知時間 10秒・30秒・連続より選択

② コンソール10の設置と接続

フックで取り付け、電源を入れて下さい。

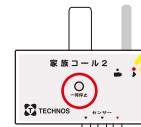
◆ センサー接続ジャックに注意！



右に差し込んで下さい。

左・中央 = 荷重がかかった時に報知
右 = 荷重がなくなった時に報知

◆ 電源入忘れ防止！一時停止ボタン



5分間作動停止後、自動復旧します。

- * 作動停止中は♪ランプが点滅。
- * すぐ解除したい時は電源を一旦OFFに。

◆ 電池切れに注意！



☑ ランプが点灯してお知らせします。

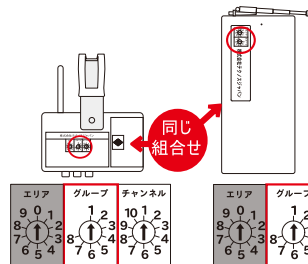
006P 9Vの電池で交換して下さい。

✓ コンソール10とメロディチャイム10は同グループで使用！

コンソール10とメロディチャイム10のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。

エリアスイッチはグループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。


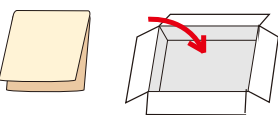
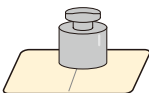

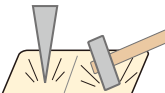


* 詳細は裏面へ



3. 動作確認方法

- ① 設置したベッドセンサーに寝て起き上がるなどして、センサーを反応させて下さい。
- ② メロディチャイム10が鳴ることを確認して下さい。


メンテナンスと注意事項

清掃方法	保管方法	
 <p>濡れた布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。 または、消毒用アルコールで清拭して下さい。</p>	 <p>所定の位置で折りたたんで箱に入れ、箱は立てずに寝かせて保管して下さい。（納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。） * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。</p>	
<p>❌ 禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。</p>		
<p>重い物 禁止</p>  <p>センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。</p>	<p>高温 禁止</p>  <p>耐温は40度です。高温になる温熱器具を近づけないで下さい。</p>	<p>衝撃 禁止</p>  <p>センサーを傷つけたり、衝撃を与えないで下さい。</p>
<p>水浸け 禁止</p>  <p>センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。</p>	<p>所定位置以外での折曲 禁止</p>  <p>折り曲げ線以外で、折り曲げないでください。また、折り曲げ線で一部を折り曲げたまま使用しないで下さい。必ずしっかり伸ばして設置して下さい。</p>	

故障かな？と思ったら

✔ (起上りを知らせるセンサーなのに) 寝たときに鳴る…
センサーはコンソール10の右ジャックに差しこんでいますか。左もしくは中央ジャックは、荷重がかかった時（寝た時）に報知をします。右ジャックに差しこんで下さい。

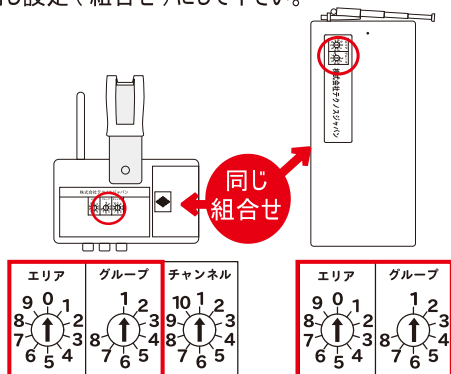✔ センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…
コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」と「グループ」設定が一致しないと報知しません。また、他のメロディチャイム10に報知するなど、混信の原因になります。コンソール10とメロディチャイム10の「エリア」「グループ」スイッチを同じ設定（組合せ）にして下さい。



- * エリアスイッチを使用しない場合は送受信器とも“0”に合わせて下さい。（出荷時は“0”に設定）
- * メロディチャイム10のグループ設定を変更した際は、電源を一度OFFにし、2～3秒経ってから再度ONにしてください。

✔ メロディチャイム10のランプが点灯する…
コンソール10の電池が消耗すると、受信した際に対応するチャンネルランプとランプが点灯します。
* コンソール10の電池消耗以外は、チャンネルランプは点滅します。
受信時以外のランプ点灯はメロディチャイム10内部電池消耗のお知らせですので、すぐにACアダプタを差込み、充電を行って下さい。充電には約2時間かかります
* 内部電池は、メロディチャイム10の移設時など短時間の電源保持が目的で実装しています。通常は、必ずACアダプタを接続してご使用下さい。

✔ コンソール10をACアダプタに差込んでもランプが消えない…
コンソール10の電池消耗ランプは電池残量を検知してお知らせをしますので、電池を変えないとランプは点灯し続けます。また、電池残量がなくなった電池を入れればなしにすると、液漏れを起こし、故障等の原因になりますので、速やかに交換するか、電池を抜いて下さい。

✔ センサーが報知をしない…コンソール10のランプが点滅している…
これはコンソール10の一時停止機能（5分間）によるものです。一時停止を解除するには電源スイッチを切り、入れ直して下さい。