

かんたん設置マニュアル

家族コール 2A・ポケット

型式
HKP-2A

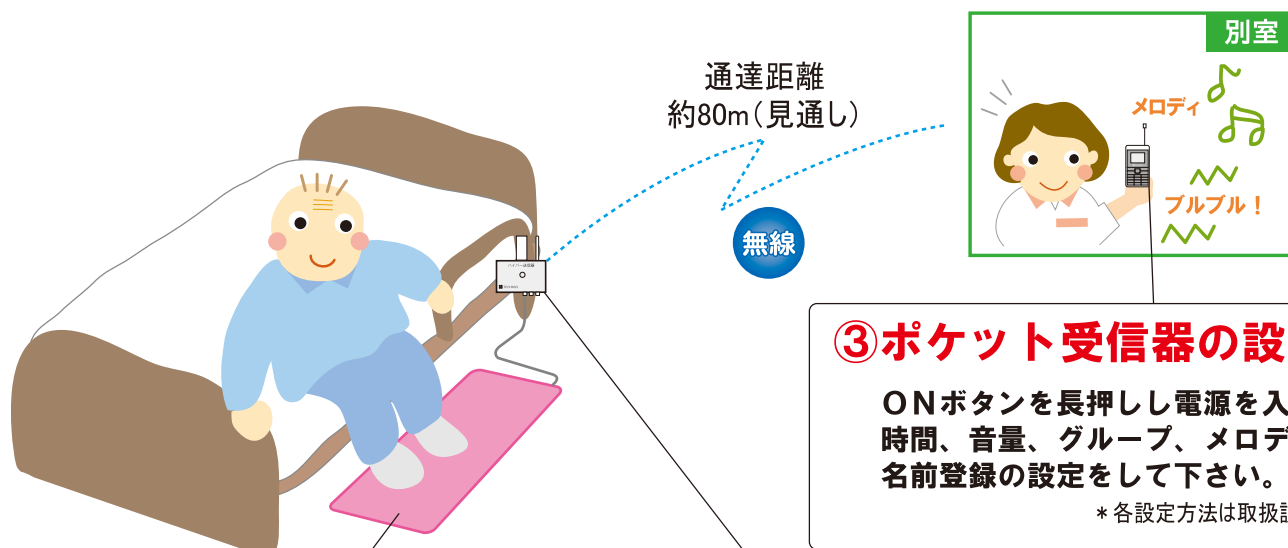
※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- ベッドから降りた、ベッドからの離床をお知らせ！
- 1人歩きが心配な方に！

1. 標準構成



2. 設置・接続と運用のポイント




③ ポケット受信器の設定

ONボタンを長押しし電源を入れ、時間、音量、グループ、メロディ、名前登録の設定をして下さい。

* 各設定方法は取扱説明書をご覧ください。

① 床センサーの設置

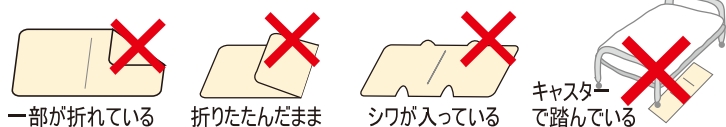
床面にまっすぐ平らに広げて設置して下さい。




② コンソール10の設置と接続

フックで取り付け、電源を入れて下さい。

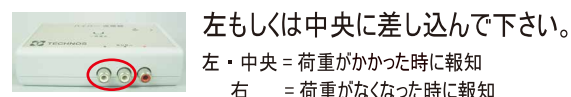
◆ センサー接続ジャックに注意！



◆ 電源入忘れ防止！一時停止ボタン

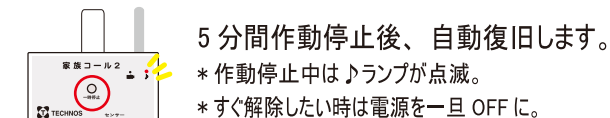

◆ 電池切れに注意！

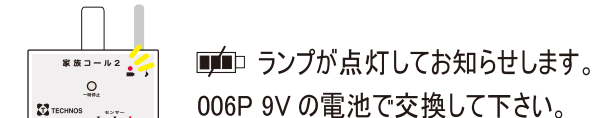


✓ コンソール10とポケット受信器は同グループで使用！

コンソール10とポケット受信器のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。

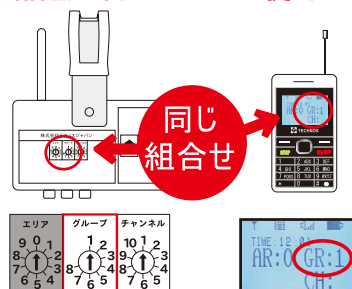エリア設定 はグループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

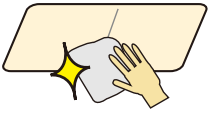
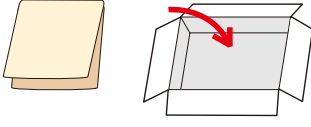
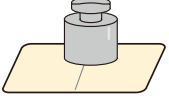
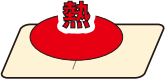

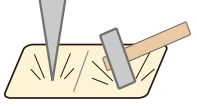

* 詳細は裏面へ



3. 動作確認方法

- ① 設置したマットスイッチを踏むなどして、センサーを反応させて下さい。
- ② ポケット受信器が鳴ることを確認して下さい。


メンテナンスと注意事項

清掃方法		保管方法	
	濡れた布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。 または、消毒用アルコールで清拭して下さい。		所定の位置で折りたたんで箱に入れ、箱は立てずに寝かせて保管して下さい。（納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。） * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。
❌ 禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。			
重い物 禁止 	センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。	高温 禁止 	耐温は40度です。高温になる温熱器具を近づけないで下さい。
水浸け 禁止 	センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。	衝撃 禁止 	センサーを傷つけたり、衝撃を与えないで下さい。
所定位置以外での折曲禁止 		折り曲げ線以外で、折り曲げないでください。また、折り曲げ線で一部を折り曲げたまま使用しないで下さい。必ずしっかり伸ばして設置して下さい。	

故障かな？と思ったら

✓ センサーが鳴るのが遅い…
センサーはコンソール10の左もしくは中央のジャックに差しこんでいますか。右は、Bタイプ用のジャックなので、センサーを踏んでその荷重がなくなった時に鳴ります。

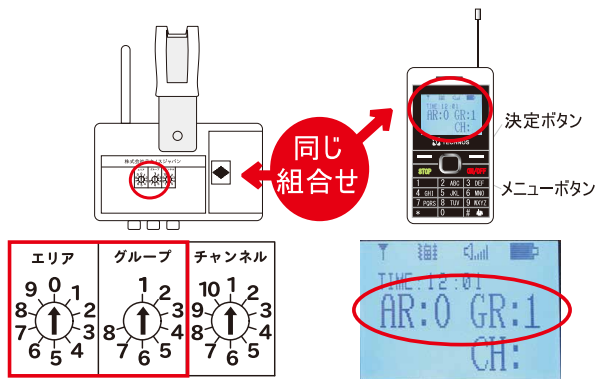✓ センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…
コンソール10とポケット受信器の「エリア」「グループ」設定が一致していないと報知しません。また、他の受信器に報知するなど、混信の原因になります。コンソール10とポケット受信器の「グループ」「エリア」設定は必ず同じ設定（組合せ）にして下さい。



- ポケット受信器の「エリア・グループ」設定
1. メニューボタンを長押し
 2. AR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
* エリア設定を使用しない場合は送受信器とも“0”に合わせて下さい。（出荷時は“0”に設定）
 3. GR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
 4. 確定後、ON/OFF ボタンで初期画面に戻る

✓ センサーが報知をしない…
受信器の液晶画面に受信履歴（CHの横に数字表示）が残っていませんか。履歴表示が残ったままだと、報知を受けた際に履歴は残りますがメロディが鳴りません。STOP ボタンを押し、履歴を全て消して下さい。

✓ センサーが報知をしない…コンソール10の♪ランプが点滅している…
これはコンソール10の一時停止機能（5分間）によるものです。一時停止を解除するには電源スイッチを切り、入れ直して下さい。

✓ バイブレーションに設定したのにメロディが鳴る…
本受信器のバイブレーションは「マナーモード」ではありません。バイブのみで報知したい場合は、音量設定を「サイレント」にして下さい。