

# かんたん設置マニュアル

## 家族コール 2C・ポケット

型式  
HKP-2C

※本書面は取扱説明書の補助資料です。  
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- 赤外線が反応してお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！


### 1. 標準構成



◀ ハイパー・赤外線センサー K (IBS180HK3)



ACアダプタ

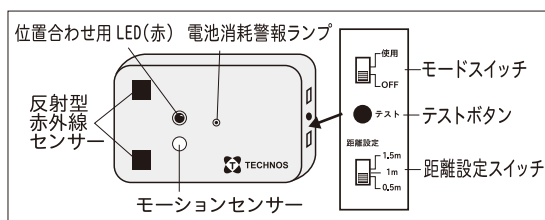


◀ ポケット受信器 (HRP800-80K)



充電器 保護ケース 防滴ケース ストラップ

### 2. 設置・接続と運用のポイント

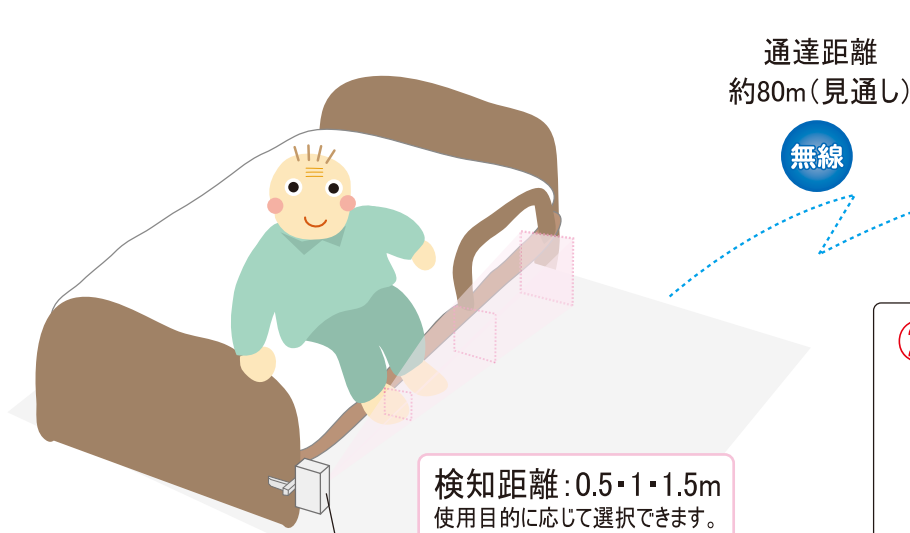

#### ② ポケット受信器の設定




ONボタンを長押しし電源を入れ、時間、音量、グループ、メロディ、名前登録の設定をして下さい。


\* 各設定方法は取扱説明書をご覧ください。

#### ① 赤外線センサーの設置と設定

◆ 「テストモード」で位置と角度を確認して下さい。

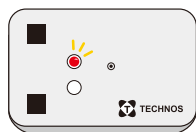


テストボタンを押すと約30秒間赤色ビームが点滅し照射範囲に入ると、「ピー」という音が鳴ります。



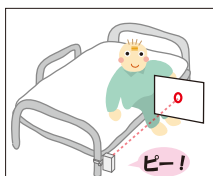


\* 白い紙などに写ります。

◆ 検知時間を設定して下さい。

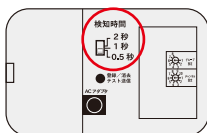

#### 赤外線センサーとメロディチャイム10は同グループで使用!

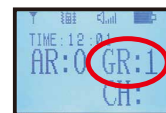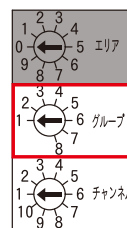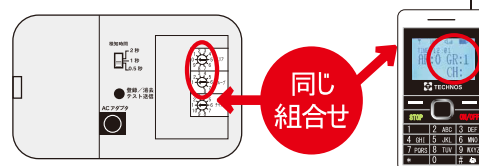


ハイパー赤外線センサー Kとポケット受信器のグループ設定を同じ設定にすることで報知します。  
エリア設定はグループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

### 3. 動作確認方法

- ① 「使用モード」で赤外線の照射範囲に入るなどして、センサーを反応させて下さい。
- ② ポケット受信器が鳴ることを確認して下さい。


# メンテナンスと注意事項

## 清掃方法

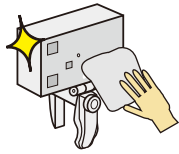

布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭して下さい。  
または、消毒用アルコールで清拭して下さい。


## 保管方法

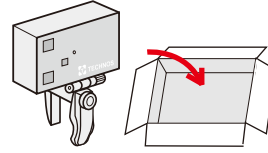

箱に入れ保管して下さい。  
（納品時の箱は保管箱としてお使いいただけます。）  
\* 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。


**禁止** 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。

**重い物  
禁止**

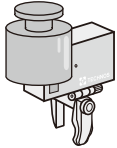


センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。

**落下  
禁止**

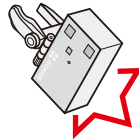

センサーを落下させないで下さい。

**衝撃  
禁止**

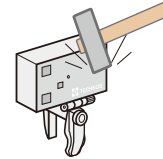

センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。

**水浸け  
禁止**



センサーは防水仕様ではありません。  
濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。

## 故障かな？と思ったら



### 電池消耗警報ランプが点灯する…

赤外線センサーの電池が消耗すると、「電池消耗警報ランプ」が点灯しお知らせします。  
電池交換をして下さい。（006P 9V アルカリ電池）



### テストモードではセンサーから「ピー」という音がするのに使用モードでは鳴らない…

テストモードでは位置合わせの際に分かりやすいよう、照射範囲に入ると「ピー」という音が鳴りますが、使用モードでは鳴りません。  
また、位置合わせ用 LED ランプも同様にテストモード時のみ点灯します。\* テスト時以外の点灯は電池交換のお知らせです。




### センサーが鳴りすぎる…鳴るのが遅い…

センサーには 0.5/1/2 秒から選択できる検知時間設定があります。例えば 2 秒を選択した場合、照射範囲内に 2 秒以上検知すると報知し、動きの速い対象者では間に合わない事があります。対象者の状態に合わせ、適切な検知時間を設定して下さい。



### センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…

センサーとポケット受信器の「エリア」「グループ」設定が一致していないと報知しません。  
また、他の受信器に報知するなど、混信の原因になります。センサーとポケット受信器の「グループ」「エリア」設定は必ず同じ設定（組合せ）にして下さい。

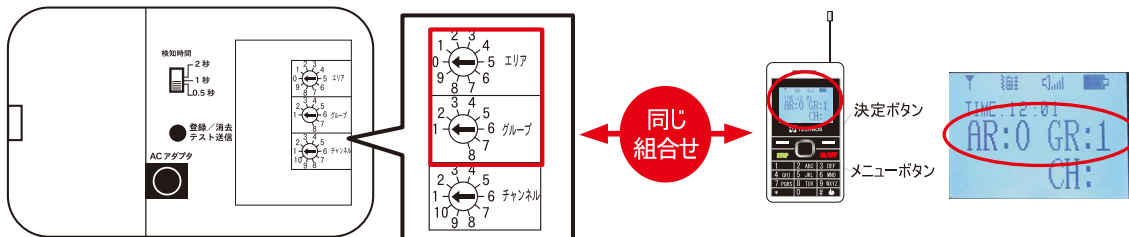

#### ■ポケット受信器の「エリア・グループ」設定

1. メニューボタンを長押し
2. AR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
3. GR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
4. 確定後、ON/OFF ボタンで初期画面に戻る

\* エリア設定を使用しない場合はセンサーポケット受信器とも“0”に合わせて下さい。（出荷時は“0”に設定）



### センサーが報知をしない…

受信器の液晶画面に受信履歴（CH の横に数字表示）が残っていませんか。履歴表示が残ったままだと、報知を受けた際に履歴は残りますがメロディが鳴りません。STOP ボタンを押し、履歴を全て消して下さい。



### バイブレーションに設定したのにメロディが鳴る…

本受信器のバイブレーションは「マナーモード」ではありません。パイブのみで報知したい場合は、音量設定を「サイレント」にして下さい。



株式会社 テクノスジャパン

修理品は販売店様にご連絡の上、本社までお送り下さい。製品運用上のお困りごと等はお客様相談室で承っています。

■ 本社：〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266 TEL:079-288-1600 FAX:079-288-0969

■ お客様相談室：☎ 0120-230-580（受付時間：祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00,13:00～18:00）