



家族コール、ハイパー受信器、ポケット受信器 専用受信器トラブル豆知識


＋ こんな症状が出た場合、要チェック

☑ センサーの上に誰も乗っていないのに受信器が鳴る。
(起き上がっていないのに鳴る。)

原因：混信の可能性があります。
通達範囲内で、同一グループ設定の機器が動作したことによる混信が考えられます。


状況

Aさん宅でセンサーを踏むとT病院の受信器も鳴る。

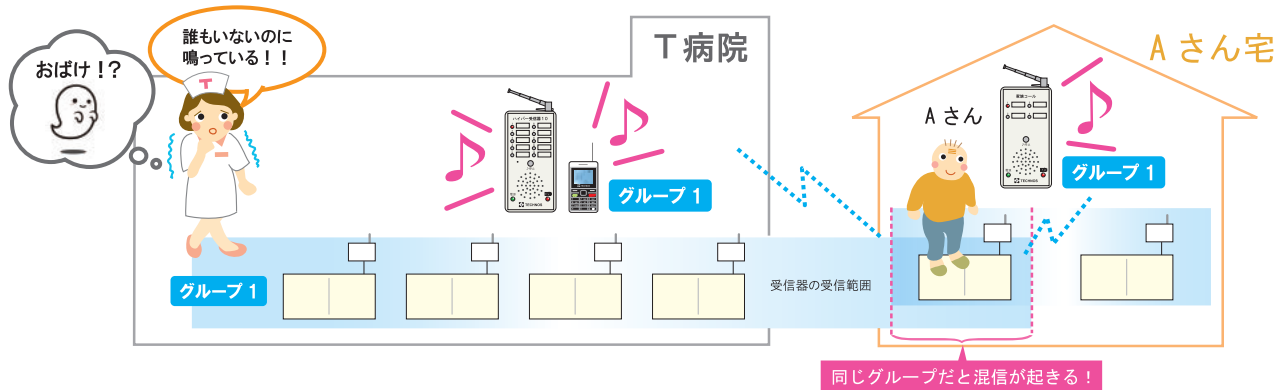

対策

T病院の送・受信器のグループを変更する事で混信が防止できます！

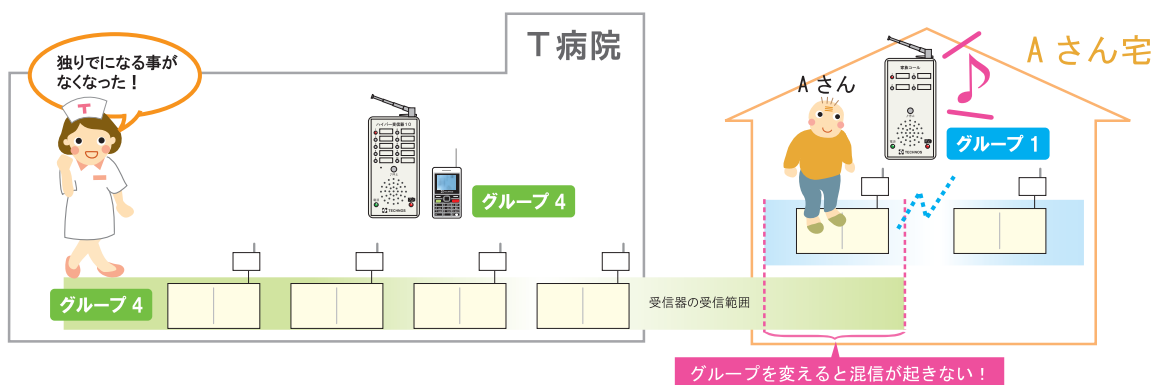

グループ変更はどうするの？

全ての送信器、受信器のスイッチを変更してください。

スイッチ箇所



スイッチの種類

■DIPスイッチ

グループ	1	2	3	4
スイッチ設定	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF

■ダイヤルスイッチ



矢印を指す番号がグループです。
※矢印の先がしっかりと数字に向くようにダイヤルを回して下さい。

ハイパー受信器(10)の変更後は必ず電源を入れ直して下さい。変更が反映されません。