

今回の Topic

介護保険レンタルでケアロボが使える！！

—介護保険レンタル向け認知症老人徘徊感知機器『ケアロボコール』—



平成 27 年（今から 2 年前）…

通信機能を有する認知症老人徘徊感知器は、これまで給付対象外でしたが、通信費用は自己負担とすることを要件に介護保険レンタルの給付対象となりました。

これに伴い、見守り介護ロボット「ケアロボ」の一部機能を制限して、介護保険レンタルに適応した製品が『ケアロボコール』です。

■ 介護者が今求めていることは…


「介護の負担軽減」という観点から、新たなサービスや福祉機器が注目されており、中でも特に「見守りシステム」への期待が高まっています。

そのなかで本当に求められるのは介護する方にとって使いやすく、シンプルであること。またインターネット環境の工事を行う必要がなく、すぐに使うことが出来る福祉用具です。

今回ご紹介する「ケアロボコール」は、そんな「あったらいいな！」が今すぐに現実になる製品です。

図表4-6 介護と仕事を両立する上で良いもの (MA)

Q37. 少子高齢化により、わが国は今後も一人暮らし高齢者の増加、働く家族介護者の増加、介護業界の労働力不足が予想されています。ご自身の介護経験をふまえ、在宅介護をしながら仕事をする上で良いと思うものがあれば選んでください。(いくつでも)

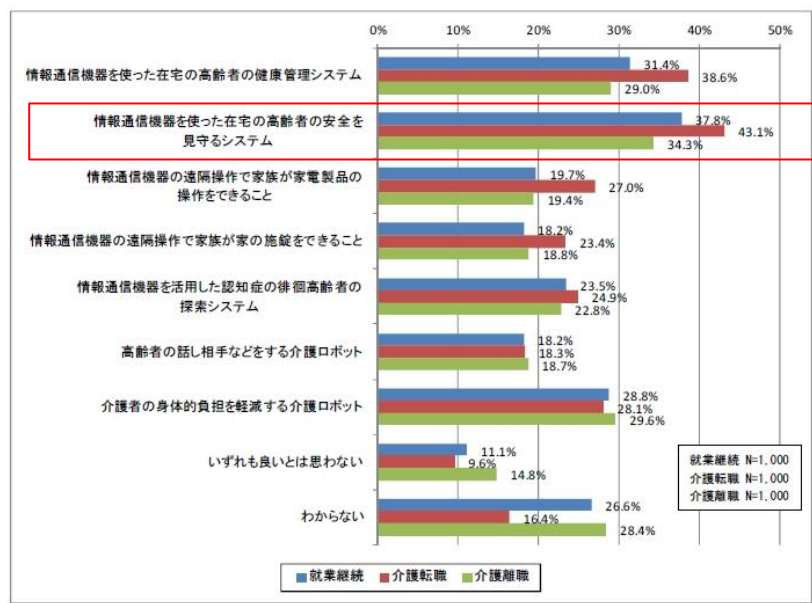

『介護と仕事の両立を実現するための効果的な在宅サービスのケア体制（介護サービスモデル）に関する調査研究』—みずほ情報総研株式会社—より抜粋

前号でご紹介の「ケアロボ」同様に、見守り要素がある製品で、「通信環境不要」（ケアロボに通信機器内蔵）で電源 ON で使用が開始できます。また、組合せのセンサーはコードレスの「かんたん設置」が可能です。G




■「ケアロボコール」（認知症老人徘徊感知機器）のタイプ別特徴

ご紹介する4つのタイプは介護保険レンタル制度の対象製品です。対象者の特定行動や徘徊を未然に知らせます。

【ケアロボコール2 A】 ベッドからの離床を報知します！

TAISコード：00318-000071


- ① 対象者がコードレス・マットスイッチを踏む。
- ② ケアロボ2がセンサーアラームを受信して連続して3枚写真を撮ります。
- ③ 登録したメールアドレスに写真が届きます。

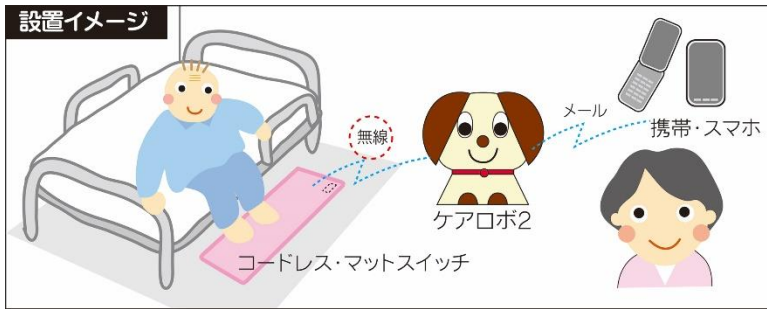

【ケアロボコール2 B】 ベッドからの起き上がりを報知します！

TAISコード：00318-000072


- ① 対象者がベッドから起き上がる。
- ② ケアロボ2がセンサーアラームを受信して連続して3枚写真を撮ります。
- ③ 登録したメールアドレスに写真が届きます。

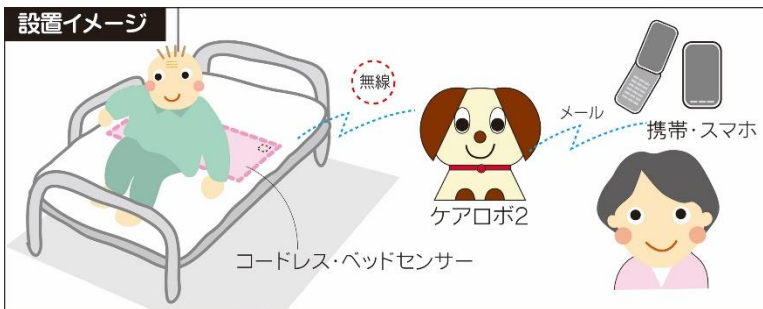

【ケアロボコール2 C】 超音波と赤外線で離室・徘徊行動を報知します！

TAISコード：00318-000073

- ① 対象者がセンサーの前を通る。（検知距離・秒設定あり）
- ② ケアロボ2がセンサーアラームを受信して連続して3枚写真を撮ります。
- ③ 登録したメールアドレスに写真が届きます。

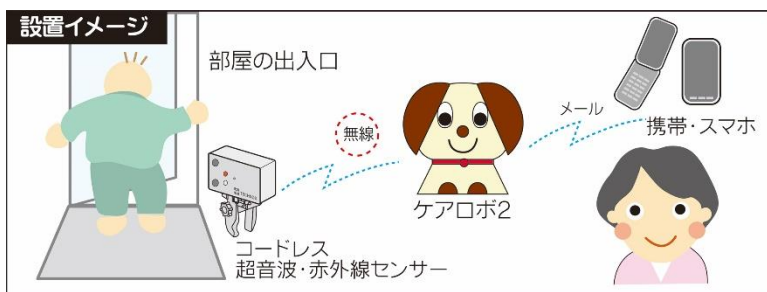


※活用の効果については今号の「在宅ケアNow」のコーナーでご紹介します

【ケアロボコール2 D】 ドアや窓を開くと報知します！

TAISコード：00318-000080

- ① ドアや窓を開ける
- ② ケアロボ2がセンサーアラームを受信して連続して3枚写真を撮ります。
- ③ 登録したメールアドレスに写真が届きます。

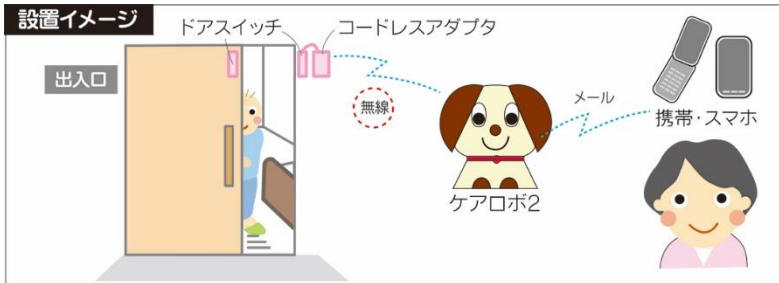

発売当初は「A・B・C」の3タイプでスタートしたケアロボコールも、現在では、ドアの開閉センサーである「Dタイプ」を加えた4タイプから選択できるようになりました。

【ケアロボコールの便利機能や特徴】

スマホ・ガラケー・パソコン
などへメールを同時に送信

最大5つのメールアドレス
に、写真付きメールを送信
します。



通信サービス料は
月額定額の1,200円

「ケアロボ」の通信サービス料金は
月額定額1,200円(税別)
の低料金です。



通信テストで安心！

スマホ・携帯からショートメールを送ると、「ケアロボ」からリアルタイムの写真付きメールが届きます。外出先や離れた場所から「ケアロボ」の動作状態をチェックできる安心機能です。

