


今月のテーマ 「家族コールワイド」のご紹介

昨年7月に発売した「家族コールワイド」は利用者の徘徊行動を、メールで知らせる画期的な徘徊感知機器です！

徘徊をメールでお知らせ

家族コールワイド

貸与マーク取得

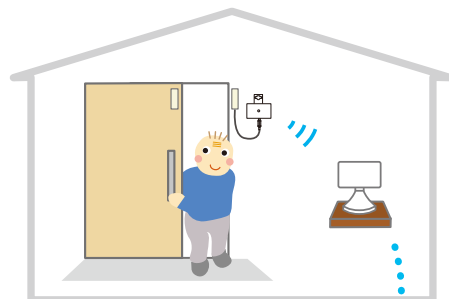

利用者の徘徊行動を、家族にメールで知らせるため、
家族が「いつでも・どこにいても」スマホで徘徊を知ることができます。
そのため、**一般在宅での見守りに効果的な製品**です！



例：家族コールワイド A（床敷きセンサー）の場合



センサーとコンソールは「家族コール3」と共通

・使い方は「家族コール3」と同じです。

徘徊感知時にメールを送信



- ・メールアドレスはアプリでかんたん登録
- ・最大3つのメールアドレスまで同時送信

センサーの種類は4種類

A	B	C	D
床に足を着くと知らせます	起き上がると知らせます	検出範囲に入ると知らせます	ドアを開けると知らせます
TAIS : 00318-000171	TAIS : 00318-000172	TAIS : 00318-000173	TAIS : 00318-000174

「家族コールワイド」運用事例

実際に家族コールワイドを使われているご家族をご紹介します。

日中使用の例

・ドアを開けると知らせる



構成


 利用者 60代	 夫 60代	 義母 80代
---	---	--

要介護 3	掴まり歩き可	同居
高次機能障害があり、突然外出することがある		
使用機種	家族コールワイド・D	

夫は日中働いており、利用者を見守ることができない。
母が利用者を見ているものの高齢のため、不安がある。
「家族コールワイド・D」を設置することで安心して
仕事に行くことができています。

夜間使用の例

・ベッドからの立ち上がりを知らせる

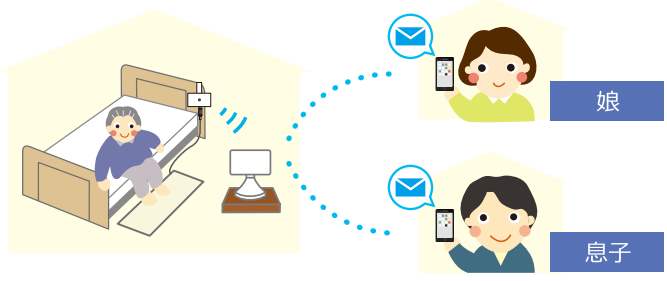

構成

 利用者 80代	 娘 50代	 息子 40代
---	---	--

要介護 2	自立歩行可	独り暮らし
・近所に住む娘がいる ・訪問介護を利用している		
使用機種	家族コールワイド・A	

日中は訪問介護サービスを利用し徘徊の危険はないが、
夜間は見守る人がおらず、心配であった。
「家族コールワイドA」を設置し、娘と息子がメール
受信先になることで夜間の徘徊対策ができた。

お取り扱いについては各卸・事業者様へ、

製品については「お客様相談室」へ、ぜひお問合せください！

