

家族コール 3B・シンプル HKSP-3B

HKSP-3B

■起き上がりをお知らせ！


■工事不要で簡単設置！

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧下さい。

■標準構成



■設置・接続と運用のポイント

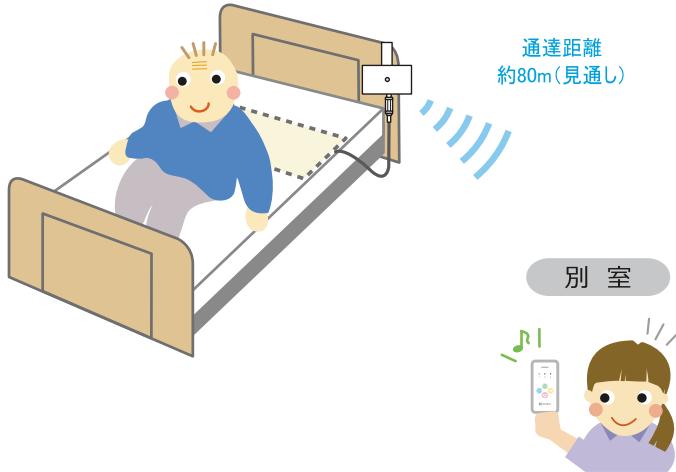

■ シンプル K の設定

電源ボタンを長押しして電源を入れてください


* 各設定方法は取扱説明書をご覧ください

■ コンソールの設置と接続

①センサーをコンソールのジャックに差し込んでください。

②フックで取り付け、電源を入れてください。

* 接点スイッチは必ず「A」にしてください。

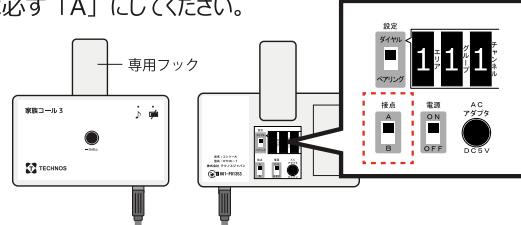

■ ベッドセンサー K の設置

マットレスの上、シートの下に設置し固定してください。

○ ベッドに対し横向き

○ 肩から背中に設置

✗ ギヤッチャップの際に折れ曲がってしまう



✗ ベッドに対し縦向き

✗ お尻にかかっている



✗ 枕の下




「ダイヤル設定」と「ペアリング設定」について

報知するための設定方法は2種類！

ダイヤル設定


- ①コンソール裏面を「ダイヤル」にする。
- ②シンプル K の登録ボタンを長押しする。
- ③ランプ点滅中に、センサーを作動させる。

ダイヤルかペアリングかを選んで登録するだけ！

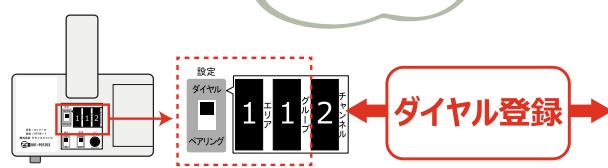

ペアリング設定

- ①コンソール裏面を「ペアリング」にする。
- ②シンプル K の登録ボタンを長押しする。
- ③ランプ点滅中に、センサーを作動させる。

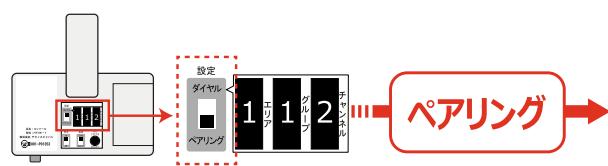



* 製品出荷時には、ダイヤル設定で出荷されています。

■ 動作確認方法

- ①設置したベッドセンサー K に寝て起き上がり、センサーを作動させてください。
- ②シンプル K が鳴ることを確認してください。

メンテナンスと注意事項

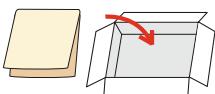清掃方法
 <p>布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。</p>
保管方法
 <p>所定の位置で折りたたんで箱に入れ、箱は立てずに寝かせて保管してください。 （納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。） * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないでください。</p>

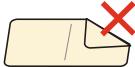🚫 禁止		
高温 禁 止		耐温は 40 度です。高温になる温熱器具を近づけないでください。
衝 撃 禁 止		センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。
重 い 物 禁 止		センサーの上に、重い物を乗せないでください。
水 浸 け 禁 止		センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。 失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。
所定位 置 以 外 の 折 曲 禁 止		折り曲げ線以外で、折り曲げないでください。また、折り曲げ線で一部を折り曲げたまま使用しないでください。必ずしっかり伸ばして設置してください。

故障かな？と思ったら

〈センサーが鳴らない…〉

設置状況の確認をしてください

確認項目



- センサーのプラグはコンソールのジャックにしっかりと差し込まれているか
- コンソール裏面の接点スイッチは「A」になっているか
- コンソールとシンプル K の電源は入っているか
- コンソールとシンプル K の距離は遠すぎないか



〈それでも鳴らない…〉

確認項目

- コンソールの♪ランプが点滅していないか
→[点滅している場合]
コンソールの「一時停止機能」が働いています。
* 一時停止を解除するには電源スイッチを入れ直してください。
- 設定が「ダイヤル設定またはペアリング設定」かを確認してください。
どちらか一方に設定することで正しく報知します。（表面・取扱説明書参照）
* シンプル K の電源ボタンを押すとダイヤルまたはペアリングでの登録チャンネル数を赤色のランプで確認できます。

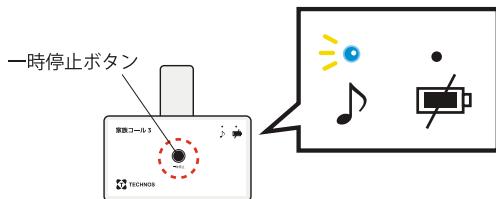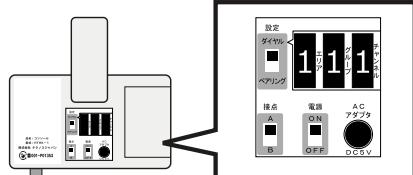

5 分間作動停止後、自動復旧します。
* 作動停止中は♪ランプが点滅。
* すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。

〈シンプル K の LED が紫色に点滅している…〉

〈コンソールの赤色のランプが点灯している…〉

●コンソールの電池消耗をお知らせしています。

コンソールの電池を交換してください。

* 電池残量がなくなった電池を入れたままにすると液漏れを起こし、

故障の原因となりますので、電池を交換するか、電池を抜いてください。

