



# センサー増設に関する豆知識


**Q** 「コールマット・ポケット」を使用しています。  
他の患者さんにもセンサーを設置したいのですが、何が必要でしょうか？




**A** 「コールマット・ポケット 増設セット」をご用意ください。  
「ハイパー送信器」を下記の通りに設定すれば受信します。



【使用中】

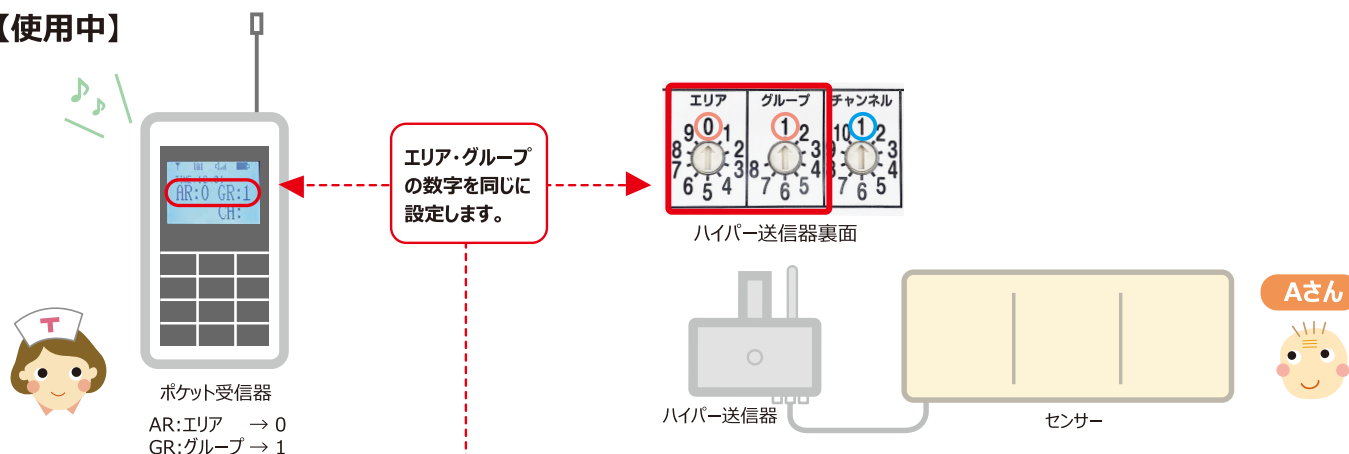

【追加（増設セット）】

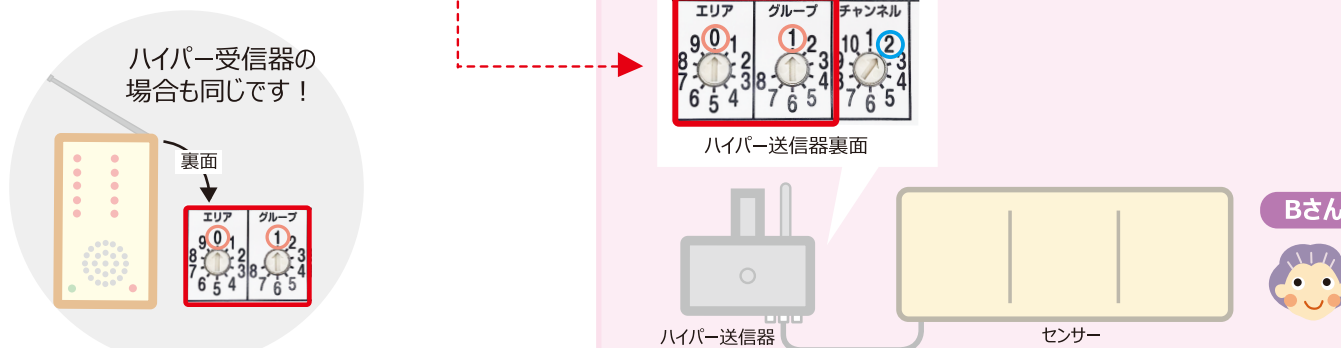

※通達距離は約80m（見通し）です。



受信器は何台までセンサーを受信できますか？ また、個人を識別するには？

「ポケット受信器」や「ハイパー受信器」は、1台の受信器で10人まで識別して受信ができます。識別するためには、「ハイパー送信器」の「チャンネル」を、Aさん⇒①、Bさん⇒②と設定すると受信時にその数字が表示され識別することができます。（ハイパー受信器は数字のランプが光ります。）

