






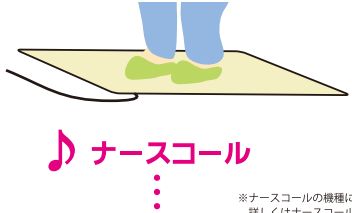



コールマットに立ちっぱなしだとどうなる？



Q コールマットの上に立ちっぱなしだとどうなりますか？

A コードレスタイプ、ケーブルタイプでそれぞれ違う現象が起こります。下記をご参照ください。




<p>マットの上に立ちっぱなしだと…</p> 	
 <p>ケーブルタイプ</p>	<p>①踏むと報知</p>  <p>♪ ナースコール</p> <p>②その後、繰り返し報知し続ける</p>  <p>♪ ナースコール</p> <p><small>※ナースコールの機種により、詳しくはナースコールメーカーにお問い合わせください。</small></p>
 <p>コードレスタイプ</p>	<p>①踏むと報知</p>  <p>♪ ナースコール</p> <p>②その後、報知しない</p>  <p>報知しない</p> <p><small>※センサーから一旦降りてから踏むと再び報知します。</small></p>

注意点

また、上記のことからマットの上には物を置かないようにしてください。誤報の原因となります。




歩行器

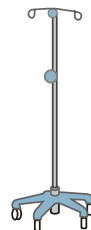

点滴台



ポータブルトイレ

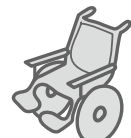

車いす など